

ŠICÍ MATERIÁL, SUTURY, JEHLY

KATALOG



+420 776 270 683

info@medcomplex.cz

Sutury Nylonové


Nylonové sutury lze využít nejen pro CCL operace, ale mohou být užitečné také pro jiné postupy náhrady vazů. Například pro kyčelní kloub, opravy kolaterálních vazů, atp.

Jedná se o nevstřebatelný materiál dodávaný ve sterilním balení.

Krimpovací trubičky se používají při fixaci sutury bez nutnosti uzlení. Oba konce vláknů se provléknou protisměrně skrze trubičku. Uprostřed se trubička lehce zmáčkne pomocí speciálních kleští tak, aby bylo možné finálně nastavit požadovanou délku smyčky. Poté se trubička uprostřed patřičně domáčkne (zamkne) a kousek od okrajů vytvoří pomocí kleští další dva zámky viz. obrázek. Vzniklý spoj má minimální rozměr i vyhovující pevnost. Při krimpování je nutno být opatrný, aby nebyla narušena integrita sutury.

Orientační tabulka pro určení vhodné sutury vzhledem k hmotosti psa při CCL operaci viz. obrázek.

APPROXIMATE SIZE OF SUTURE FOR CCL										
DOG WEIGHT	5 kg	10 kg	15 kg	20 kg	25 kg	30 kg	35 kg	40 kg	45 kg	
NYLON MONOFILAMENT		50 lb								
NYLON MONOFILAMENT			80 lb							
NYLON MONOFILAMENT				100 lb						
NYLON MONOFILAMENT						2 x 80 lb				
NYLON MONOFILAMENT							2 x 100 lb			
POLYETHYLENE E-FIBER	EP 5									
POLYETHYLENE E-FIBER		EP 6								
POLYETHYLENE E-FIBER			EP 7							
POLYETHYLENE E-FIBER					EP 9					
POLYETHYLENE E-FIBER								2 x EP 9		

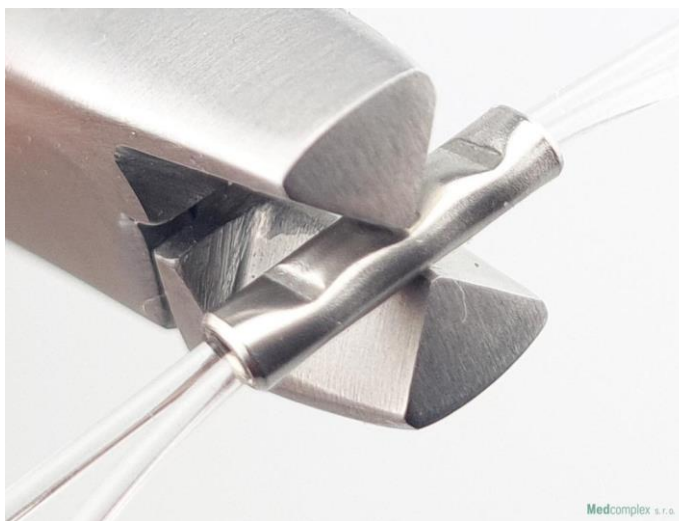

Nylonová Sutura




23-ZC050	Nylonová Sutura Monofilní 50 lb, délka 50 cm	120 Kč
23-ZC080	Nylonová Sutura Monofilní 80 lb, délka 80 cm	125 Kč
23-ZC100	Nylonová Sutura Monofilní 100 lb, délka 80 cm	129 Kč

Nylonová Sutura + 1 CRIMP



23-ZC05010	Nylonová Sutura Monofilní 50 lb, délka 50 cm + 1 x CRIMP	205 Kč
23-ZC08012	Nylonová Sutura Monofilní 80 lb, délka 80 cm + 1 x CRIMP	214 Kč
23-ZC10012	Nylonová Sutura Monofilní 100 lb, délka 80 cm + 1 x CRIMP	232 Kč

Nylonová Sutura + 3 CRIMP

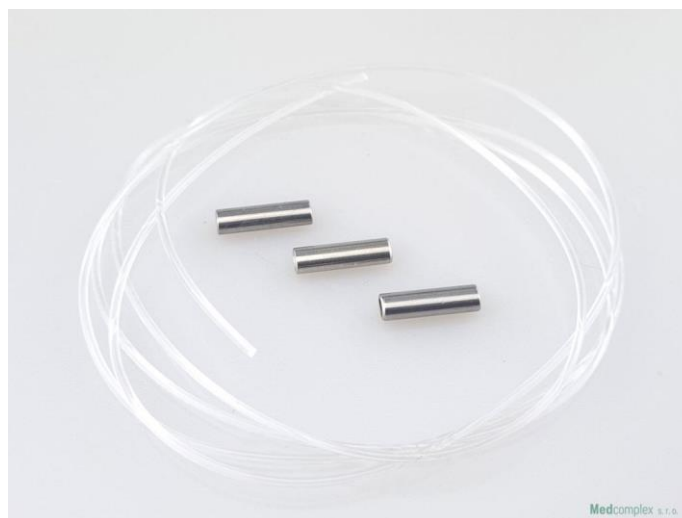

23-ZC05010-3	Nylonová Sutura Monofilní 50 lb, délka 50 cm + 3 x CRIMP	303 Kč
23-ZC08012-3	Nylonová Sutura Monofilní 80 lb, délka 80 cm + 3 x CRIMP	330 Kč
23-ZC10012-3	Nylonová Sutura Monofilní 100 lb, délka 80 cm + 3 x CRIMP	374 Kč

Nylonová Sutura s Jehlou + 1 CRIMP



23-ZC0501005	Nylonová Sutura Monofilní 50 lb, délka 50 cm, s Jehlou 30 mm + 1 x CRIMP	279 Kč
23-ZC0801204	Nylonová Sutura Monofilní 80 lb, délka 80 cm, s Jehlou 45 mm + 1 x CRIMP	292 Kč
23-ZC1001203	Nylonová Sutura Monofilní 100 lb, délka 80 cm, s Jehlou 62 mm + 1 x CRIMP	316 Kč

Dvojitá Nylonová Sutura s Jehlou



23-ZC0500005L	Dvojitá Nylonová Sutura Monofilní 50 lb, délka 100 cm, s Jehlou 30 mm	434 Kč
23-ZC0800004L	Dvojitá Nylonová Sutura Monofilní 80 lb, délka 160 cm, s Jehlou 45 mm	352 Kč
23-ZC0800003L	Dvojitá Nylonová Sutura Monofilní 80 lb, délka 160 cm, s Jehlou 62 mm	361 Kč
23-ZC1000003L	Dvojitá Nylonová Sutura Monofilní 100 lb, délka 160 cm, s Jehlou 62 mm	370 Kč

Dvojitá Nylonová Sutura s Jehlou + 2 CRIMP



23-ZC0501005L	Dvojitá Nylonová Sutura Monofilní 50 lb, délka 100 cm, s Jehlou 30 mm + 2 CRIMP	410 Kč
23-ZC0801204L	Dvojitá Nylonová Sutura Monofilní 80 lb, délka 160 cm, s Jehlou 62 mm + 2 CRIMP	419 Kč
23-ZC1001203L	Dvojitá Nylonová Sutura Monofilní 100 lb, délka 160 cm, s Jehlou 62 mm + 2 CRIMP	428 Kč

Sutury Polyethylenové

E-FIBER je nový šicí materiál s vysokou pevností v tahu vhodný pro náhradu vazů nebo šlach. Lze jej použít pro mnohé aplikace, např. pro náhradu křížových vazů CCL. Polyethylenové vlákno s prodlouženým molekulárním řetězcem (Ultra High Molecular Weight Polyethylene) vyniká jedním z největších koeficientů pevnosti vzhledem k jeho váze. Má více než dvojnásobnou pevnost v tahu oproti monofilnímu silonu. Jedinečná konstrukce opletení s modrou stopou poskytuje lepší viditelnost při práci. Má vynikající pružnost a pevnost v tahu, trvanlivost a odolnost proti únavě. Vítanou vlastností pro laterální sutury je odolnost proti otěru (obrušování).

E-Fiber Polyethylenová Sutura (CCL)



23-ZCB5	E-Fiber Sutura EP 5 / USP 2, délka 50 cm, do 10kg	510 Kč
23-ZCB6	E-Fiber Sutura EP 6 / USP 3-4, délka 50 cm, 10-20kg	552 Kč
23-ZCB7	E-Fiber Sutura EP 7 / USP 5, délka 50 cm, 20-30kg	595 Kč
23-ZCB9	E-Fiber Sutura EP 9 / USP 7, délka 60 cm, 30-40kg	680 Kč

E-Fiber Polyethylenová Sutura (CCL) + Jehly (rovná a zahnutá)



23-ZCB5N	E-Fiber sutura EP 5 / USP 2, délka 30 cm + rovná a zahnutá jehla, do 10kg	680 Kč
23-ZCB6N	E-Fiber sutura EP 6 / USP 3-4, délka 50 cm + rovná a zahnutá jehla, 10-20kg	807 Kč
23-ZCB7N	E-Fiber sutura EP 7 / USP 5, délka 50 cm + rovná a zahnutá jehla, 20-30kg	850 Kč
23-ZCB9N	E-Fiber sutura EP 9 / USP 7, délka 60 cm + rovná a zahnutá jehla, 30-40kg	935 Kč

E-Fiber Polyethylenová Sutura (CCL) + Jehly + 1 CRIMP



23-ZCB5NC	E-Fiber sutura EP 5 / USP 2, délka 30 cm + rovná a zahnutá jehla + 1 CRIMP	807 Kč
23-ZCB6NC	E-Fiber sutura EP 6 / USP 3-4, délka 50 cm + rovná a zahnutá jehla + 1 CRIMP	935 Kč
23-ZCB7NC	E-Fiber sutura EP 7 / USP 5, délka 50 cm + rovná a zahnutá jehla + 1 CRIMP	977 Kč
23-ZCB9NC	E-Fiber sutura EP 9 / USP 7, délka 60 cm + rovná a zahnutá jehla + 1 CRIMP	1 062 Kč

E-Fiber Dvojitá Polyethylenová Sutura (CCL) + Jehly (rovná a zahnutá)



23-ZCB9N2	E-Fiber Dvojitá sutura EP 9 / USP 7, délka 60 cm + rovná a zahnutá jehla	1 275 Kč
------------------	--	-----------------

E-Fiber Dvojitá Polyethylenová Sutura (CCL) + Jehly + 2 CRIMPY



23-ZCB9N2C	E-Fiber Dvojitá sutura EP 9 / USP 7, délka 60 cm + rovná a zahnutá jehla + 2 CRIMP	1 402 Kč
-------------------	--	-----------------

E-Fiber Polyethylenová Sutura Pásková



23-ZCT2	E-Fiber Polyethylenová Sutura Pásková, šířka 2 mm, délka 20 cm	510 Kč
23-ZCT3	E-Fiber Polyethylenová Sutura Pásková, šířka 3 mm, délka 20 cm	552 Kč
23-ZCT4	E-Fiber Polyethylenová Sutura Pásková, šířka 4 mm, délka 20 cm	595 Kč
23-ZCT4-25	E-Fiber Polyethylenová Sutura Pásková, šířka 4 mm, délka 25 cm	722 Kč
23-ZCT5	E-Fiber Polyethylenová Sutura Pásková, šířka 5 mm, délka 20 cm	680 Kč
23-ZCT5-30	E-Fiber Polyethylenová Sutura Pásková, šířka 5 mm, délka 30 cm	935 Kč
23-ZCT6	E-Fiber Polyethylenová Sutura Pásková, šířka 6 mm, délka 20 cm	765 Kč
23-ZCT6-40	E-Fiber Polyethylenová Sutura Pásková, šířka 6 mm, délka 40 cm	1 105 Kč

Krimpovací trubičky



23-ZC00010	Trubičky CRIMP 10mm pro NYLON 50 lb nebo E-FIBER USP 2,3,4 (bal 12ks)	646 Kč
23-ZC00012	Trubičky CRIMP 12mm pro NYLON 80 a 100 lb nebo E-FIBER USP 5 (bal 12ks)	708 Kč
23-ZC00014	Trubičky CRIMP 14mm pro NYLON 100+ lb nebo E-FIBER USP 7 (bal 12ks)	838 Kč

Jehly

Fabella jehly CCL



Medcomplex s.r.o.

23-ZC0000005-6	FABELLA jehly CCL VERY SMALL 30mm - 6ks	334 Kč
23-ZC0000004-6	FABELLA jehly CCL SMALL 45 mm - 6ks	343 Kč
23-ZC0000003-6	FABELLA jehly CCL MEDIUM 62 mm - 6ks	356 Kč
23-ZC0000002-6	FABELLA jehly CCL LARGE 80 mm - 6ks	356 Kč
23-ZC0000005	FABELLA jehly CCL VERY SMALL 30 mm - 12ks	557 Kč
23-ZC0000004	FABELLA jehly CCL SMALL 45 mm - 12ks	566 Kč
23-ZC0000003	FABELLA jehly CCL MEDIUM 62 mm -12ks	628 Kč
23-ZC0000002	FABELLA jehly CCL LARGE 80 mm - 12ks	628 Kč

Chirurgická jehla 3/8 kruhu



Medcomplex s.r.o.

23-Z400	Jehla chirurgická Heftnadel 200 mm	281 Kč
---------	------------------------------------	--------

Krimpovací kleště

Kleště CRIMP



Medcomplex s.r.o.

03-JO-21-1107	Kleště CRIMP Standard AM1 na CCL spojovací trubičky	3 413 Kč
---------------	---	----------

Medcomplex s.r.o.

Masty 1
518 01 Dobruška
Czech Republic
email: info@medcomplex.cz
mobil: +420 776 270 683

Ceny jsou uvedeny bez DPH / ks bez nákladů na dopravu a jsou platné ke dni vydání nabídky (3.1.2024)