

# VYBAVENÍ ORDINACE

## KATALOG



+420 776 270 683

[info@medcomplex.cz](mailto:info@medcomplex.cz)

# Veterinární stoly

## Multifunkční stůl MST BASIC

Stůl MST je nejučelnějším stolem pro vyšetřování a ošetřování malých zvířat. Rozměr patientské desky 130x60 cm poskytuje dostatek místa jak pro pacienta tak i ošetřující personál. Nosnost 90 kg a pouze **30 cm spodní poloha** umožňují manipulaci i s největšími plemeny psů. Horní poloha 105 cm dovoluje pohodlně pracovat na velmi malých zvířatech. Stůl dodáváme s elektrickým pohonem s nožním ovládáním nebo hydraulickým pohonem, dle přání zákazníka. Standartní provedení na stavitelných nožičkách je možné nahradit brzděnými kolečky a získat tak pojízdný stůl.

- Měnitelná výška: 30 až 105cm
- Plochá pracovní deska: 130x60cm
- Euro lišty ze všech čtyř stran
- Standartně stavitelné nožičky
- Nosnost 90kg
- Elektrické, nebo hydraulické provedení

Volitelně:

- S brzděnými kolečky
- Se zabudovanou váhou
- Celý z nerezové oceli



04-MSTA	Economy s plochou deskou – lakované provedení bez EUR lišt	33 930 Kč
04-MSTB	Basic s plochou deskou – lakované provedení	36 270 Kč
04-MSTC	Basic s profilovanou deskou – lakované provedení	38 025 Kč
04-MSTD	Basic s plochou deskou – celonerezové provedení	46 332 Kč
04-MSTE	Basic s profilovanou deskou – celonerezové provedení	48 087 Kč

## Multifunkční stůl MST COMFORT

Rozšířená verze stolu se sklopnou profilovanou deskou s odtokem. Vhodný pro operační účely

- Nízká spodní poloha stolu
- Výškově nastavitelné nožičky





<b>04-MSTF</b>	Comfort s profilovanou deskou – lakované provedení	<b>42 120 Kč</b>
<b>04-MSTG</b>	Comfort s profilovanou deskou – celonerezové provedení	<b>53 820 Kč</b>

## Multifunkční stůl VET BASIC

Stůl VET Basic je určen pro vyšetřovací účely. Má plynule měnitelnou výšku v rozmezí 630 až 1150 mm. Zdvih pracovní desky je zajištěn elektrickým pohonem s nožním ovládáním nebo hydraulickým pohonem (na obrázku níže), dle přání zákazníka. Pracovní deska je z nerezové oceli o rozměrech 130 x 60 cm a standardně je opatřena EURO lištami ze všech čtyř stran. Standardní provedení na stavitelných nožičkách je možné nahradit brzděnými kolečky a získat tak pojízdný stůl. Jeho nosnost dosahující 120 kg je dostačující i pro velké pacienty.

Další volitelnou možností je zabudování váhy do desky stolu.



<b>04-VET-E</b>	Economy s plochou deskou – lakované provedení bez EUR lišt	<b>31 590 Kč</b>
<b>04-VET-B1</b>	Basic s plochou deskou – lakované provedení	<b>33 930 Kč</b>
<b>04-VET-B2</b>	Basic s profilovanou deskou – lakované provedení	<b>35 685 Kč</b>
<b>04-VET-B3</b>	Basic s profilovanou deskou – lakované provedení s váhou	<b>54 535 Kč</b>

## Multifunkční stůl VET COMFORT

- měnitelná výška od 650 do 1170 mm
- profilová nerezová operační deska 1300 x 600 mm
- plynule měnitelný sklon 0 až 60 stupňů
- nastavitelné nožičky nebo brzděná kolečka
- nosnost do 120 kg
- dentální nástavec s odkapávací nerezovou vaničkou





Medcomplex s.r.o.

<b>04-VET-C</b>	Comfort s profilovanou deskou – lakované provedení	<b>38 610 Kč</b>
-----------------	----------------------------------------------------	------------------



Medcomplex s.r.o.

<b>04-VET V-TOP1</b>	V-TOP – lakované provedení	<b>57 330 Kč</b>
<b>04-VET V-TOP2</b>	V-TOP – celo-nerezové provedení	<b>67 392 Kč</b>

## Operační stůl VET V-TOP

V-TOP je veterinární operační stůl s měnitelnou výškou zdvihu od 630 do 1150 mm. Zdvih pracovní desky je prováděn elektrickým pohonem s nožním ovládáním nebo hydraulickým pohonem, dle přání zákazníka. Pracovní plocha je sestavena ze tří nerezových desek, z nich dvě jsou plynule manuálně nastavitelné v rozmezí 0 až 90 stupňů. Celý stůl lze pak naklonit v rozmezí 0 až 60 stupňů. Rozměr desky je 134 x 52 cm, nebo dle přání 134 x 60 cm, a je opatřena EURO lištami 25 x 10 mm. Standardní provedení na stavitelných nožičkách je možné nahradit brzděnými kolečky a získat tak pojízdný stůl.

Další volitelnou možností je zabudování váhy do desky stolu.

## Operační stůl VET DWT

DWT je veterinární operační stůl pro takzvané 'špinavé operace' a plynule měnitelnou výškou od 75 do 127 cm. Pacientská deska je konstruována jako vana o rozměrech 135 x 62 cm a hloubkou 12 cm, jejíž horní víko tvoří nerezový rošt. Odtok z flexibilní hadice o průměru 40 mm umožňuje přímé připojení do odpadu. Zdvih vany je zajištěn elektrickým pohonem s nožním ovládáním nebo hydraulickým pohonem, dle přání zákazníka. Má plynule měnitelný sklon v rozmezí 0 až 25 stupňů. Na přání je možnost stůl dovybavit vodovodní baterií. Pro uchycení příslušenství a fixaci pacienta jsou po stranách nerezové EURO lišty 25 x 10 mm. Standardní provedení na stavitelných nožičkách je možné nahradit brzděnými kolečky a získat tak pojízdný stůl.



Medcomplex s.r.o.



Medcomplex s.r.o.



Medcomplex s.r.o.



Medcomplex s.r.o.

**04-VET-DWT** DWT – lakované provedení **54 990 Kč**

## Operační stůl DCT

Veterinární operační stůl s měnitelnou výškou pracovní desky od 73 do 113 cm. Zdvih pracovní desky je zajištěn elektrickým pohonem s ručním ovládáním. Pracovní deska je sestavena ze tří nerezových desek, z nichž dvě jsou plynule manuálně nastavitelné v rozmezí 0 až 28° podélně a  $\pm 40^\circ$  do příčné. Rozměr desky je 130 x 52 cm (volitelně 60 cm) a je opatřena euro lištami 25 x 10 mm. Standardní provedení na stavitelných nožičkách je možné nahradit brzděnými kolečky a získat tak pojízdný stůl.

- nastavitelná výška od 73 do 113 mm
- pracovní deska: 130 x 52 cm (60 cm)
- plynule podélně sklopný 0 až 28 stupňů
- plynule příčně sklopný  $\pm 40$  stupňů
- nastavitelné nožičky nebo brzděná kolečka
- nosnost 120 kg

Lze doplnit o širokou nabídku příslušenství, jako například nástavce, rychloupínky, držáky infuzních tyčí...



Medcomplex s.r.o.

<b>04-DCTA</b>	RTG deska (2 motory, bez bočního sklápění)	<b>55 900 Kč</b>
<b>04-DCTB</b>	RTG deska (3 motory - s bočním sklápěním)	<b>69 550 Kč</b>
<b>04-DCTC</b>	V-TOP (2 motory - bez bočního sklápění)	<b>55 900 Kč</b>
<b>04-DCTD</b>	V-TOP (3 motory - s bočním sklápěním)	<b>69 550 Kč</b>
<b>04-DCTE</b>	Pohyblivá RTG deska (4 motory - s bočním sklápěním)	<b>81 900 Kč</b>

## Příslušenství ke stolům

### Dentální nástavec



Medcomplex s.r.o.

### Prodlužovací nástavec



Medcomplex s.r.o.

### Rychloupínka excentrická



Medcomplex s.r.o.

## Veterinární RTG diagnostický stůl

Veterinární vyšetřovací stůl pro RTG snímkování. Pracovní deska o rozměrech 1500 x 645 mm je ve výšce 70 cm. Držák kazety je umístěn těsně pod pracovní deskou ve výsuvné zásuvce, která se pohybuje synchronně se sloupem, na kterém je uchyten RTG přístroj. Stůl se dodává se stavitelnými nožičkami a kolébkou pro snímkování displazie kyčelních kloubů včetně posuvných bočnic.

- výška pracovní desky: 70 cm
- pracovní deska: 150 x 64,5 cm
- zásuvka pro kazety až 49 x 49 cm
- nosnost 120 kg



Medcomplex s.r.o.



Medcomplex s.r.o.



Medcomplex s.r.o.

Zásuvka na kazetu se středěním

synchronní pojezdový mechanismus

<b>04-BAT</b>	Příplatek za vestavění baterie pro stoly MST a VET	<b>8 775 Kč</b>
<b>04-PV</b>	Příplatek za vestavění váhy pro stoly Basic	<b>18 850 Kč</b>
<b>04-GP</b>	Gumová podložka pro stoly Basic a Comfort	<b>1 391 Kč</b>
<b>04-DN</b>	Dentální nástavec	<b>5 070 Kč</b>
<b>04-IP</b>	Instrumentační policička celonerezová	<b>6 760 Kč</b>
<b>04-PN</b>	Prodlužovací nástavec	<b>2 925 Kč</b>
<b>04-RU</b>	Rychloupínka excentrická	<b>715 Kč</b>
<b>04-IT</b>	Infuzní tyč s držákem na euro lištu	<b>1 820 Kč</b>
<b>04-CBK</b>	Sada čtyř brzděných dvojitych koleček – průměr 75 mm	<b>1 560 Kč</b>
<b>04-CBK1</b>	Sada čtyř brzděných dvojitych koleček – průměr 100 mm	<b>2 899 Kč</b>

<b>04-RTGA</b>	RTG deska bez kolébkky DKK	<b>36 010 Kč</b>
<b>04-RTGB</b>	RTG deska s kolébkkou DKK	<b>38 870 Kč</b>

## Instrumentační stolek

Pojízdný instrumentační stolek v celonerezovém provedení s dostatečně velikou vaničkou o rozměrech 420 x 620 mm. Má snadno měnitelnou výšku od 80 do 130 cm, ergonomické provedení a dvě kolečka s brzdou.



Medcomplex s.r.o.

**04-IS** Instrumentační stolek – nerezový **7 215 Kč**

## Držák dýchacích hadic

Držák dýchacích hadic je určen na fixaci dýchacích hadic od narkotizačního přístroje při operaci. Upevňuje se k operačnímu, popřípadě k jinému stolu na eurolištu o rozměrech 25x10mm. Jeho tři nezávislé klouby umožňují dokonalé nastavení v každé pozici. Vlastní uchycení hadic je univerzální a je možno do něj upnout všechny druhy dýchacích hadic.



Medcomplex s.r.o.

**04-DDH11** Držák dýchacích hadic se třemi klouby **6 110 Kč**

## Vážení zvířat

### Pacientská elektronická váha

Pacientská elektronická váha má vodovzdornou nerezovou nášlapnou desku o rozměrech 90 x 60 cm. Součástí balení je gumová podložka a držák jednotky na zeď. Rozsah vážení je 0 až 150 kg a rozlišení váhy je 50 g. Váha je vybavena funkcí HOLD pro vážení neklidných pacientů.



Medcomplex s.r.o.

**04-PV** Pacientská elektronická váha **12 870 Kč**

### Veterinární váha

Veterinární váha se základnou s protismykovým PVC. Nosnost 100 kg, automatické nulování. Základna je opatřena protiskluzovým PVC, proto se váha snadno čistí. Automatické nulování.

Fyzické vlastnosti:

Rozměry 850 x 620 x 45 mm

Napájení Baterie

Hmotnost 5,5 kg

Nosnost 100 kg

Dělení stupnice 50 g PVC základnou



Medcomplex s.r.o.

**16-P04318** Veterinární váha s PVC základnou **4 609 Kč**

## Veterinární váha

Váha je určena pro vážení zvířat ve veterinárních ordinacích a klinikách. Její konstrukce umožňuje snadné čištění. Základní funkce: nastavení nuly, tárování, přepínání mezi hodnotami Brutto/Netto, referenční počítání kusů, součet, funkce vážení zvířat-vyhodnotí hodnotu také při pohybu zátěže, indikace dosažené předvolené hodnoty, automatické vypínání.

### Technické parametry:

- Váživost 0 - 150 kg po 50 g; 150 - 300 kg po 100 g
- Napájení: 220V nebo vestavěný akumulátor (až 30 hodin při stálém provozu, zobrazení stavu baterie)
- Držák a kolečka pro snadnější transport
- Zásuvkový kabel indikátoru k bezpečnému transportu
- Funkce TARA
- Funkce nulování
- LCD displej, podsvícený (6ti místný, rozměr panelu 222x134x53mm)
- Spirálový kabel délka ca. 0,7-1,0m
- Nerezová plošina
- Rozměry plošiny 905 x 505 mm



Medcomplex s.r.o.

**05-VV** Veterinární váha **9 800 Kč**

## Plošinová váha

Extrémně robustní a stabilní váha pro velká zvířata. Žárově pozinkováno.

### Základní funkce:

- Nastavení nuly, tárování, přepínání mezi hodnotami Brutto/Netto
- Referenční počítání kusů, součet
- Funkce vážení zvířat-vyhodnotí hodnotu také při pohybu zátěže
- Indikace dosažené předvolené hodnoty
- Automatické vypínání



Medcomplex s.r.o.

**05-VVZ** Plošinová váha **29 700 Kč**



# Germicidní světla

## Germicidní svítidlo otevřené

Germicidní svítidlo otevřené - efektivní germicidní záření pro dezinfekci interiéru.

Všestranné využití. K desinfekci vzduchu, předmětů a ploch pomocí přímého působení baktericidního UV-C záření germicidních lamp. Působením záření dochází k narušení buněčné struktury mikroorganismů, které hynou.

Konstrukce: Germicidní svítidlo je vybaveno stojanem s bržděnými kolečky a počítadlem provozních hodin (PPH) pro zobrazení celkové doby svícení zářivky.

Germicidní zářivkovou trubici je nutno vyměnit po 8.000 hodinách provozu. Po uplynutí této doby zářivka výrazně ztrácí svoji účinnost.

Protože germicidní Ultra-Fialové světlo je nebezpečné pro oči, lze využívat pouze v době, kdy v nich nepobývají lidé nebo zvířata. G-světlo dezinfikuje vzduch a plochy, na které přímo dopadá (je neúčinné ve stínu).

V případě zájmu lze dodat i bez stojanu připravené pro montáž na zeď.



Medcomplex s.r.o.

16-P01827	Germicidní svítidlo otevřené, stojan, počítadlo hodin	5 020 Kč
-----------	-------------------------------------------------------	----------

## Germicidní svítidlo uzavřené

Germicidní lampa 72W A (A = air/vzduch) v nástěnném provedení s počítadlem provozních hodin. Používají se všude tam, kde není možné zajistit čistotu ovzduší, případně v prostředích se zvýšenými nároky na čistotu ovzduší. Tento druh dezinfekce je možné aplikovat i za přítomnosti lidí, jde o nepřímé záření, takže riziko přímého ozáření nehrozí! Lampy využívají účinků ultrafialového záření vlnové délky 253,7nm spektra UVC na dezinfekci vzduchu. Vzduch nasátý vstupním ventilátorem proudí pod zdrojem UVC záření, přičemž vzdálenost od tohoto zdroje je velmi malá a intenzita záření velmi vysoká, či-li vzduch proudící z lampy díky druhému ventilátoru je kvalitně dezinfikován. Dezinfekce nastává v okamžiku působení tohoto záření na mikroorganismy, které v důsledku narušení buněčných struktur rychle hynou.



Medcomplex s.r.o.

16-P07726	Germicidní svítidlo uzavřené, nástěnné, počítadlo hodin	15 279 Kč
-----------	---------------------------------------------------------	-----------

# Operační světla

## Malé operační světlo LED 130F

Malé operační světlo LED-130F je fokusovatelná verze vyšetřovacího světla LED-130. Je vylepšené o vyměnitelnou sterilizovatelnou rukojeť, pomocí které je možno měnit velikost operačního pole v rozmezí 14 až 25 cm.

Světlo osazené 19ti výkonnými speciálně navrženými LED zaručuje homogenitu a nejnižší zastínění ve světelném poli. Díky dříve nedosažitelnému zobrazení barev lze snadno vidět i nejmenší odstíny barvy v tkáni. Barevné spektrum rány je zobrazeno přirozeně s výrazným kontrastem. Světlo tak poskytuje vítanou úlevu pro Vaše oči. Dělá se v pojízdném, nástěnném nebo stropním provedení. Držáky na strop jsou individuálně přizpůsobeny dle výšky stropu. Světlo je výškově a stranově přestavitelné a tím umožňuje nasvítit z jakéhokoliv směru libovolné místo stolu v jakékoliv poloze stolu. Životnost delší než 40.000 provozních hodin snižuje výrazně náklady na výměnu a náhradu žárovek v porovnání s konvenční halogenovou technologií. Světelná intenzita ve vzdálenosti 1 m je 60.000 Luxů, kterou lze regulovat v rozmezí 50 až 100% pomocí ovladače integrovaného do krytu lampy.

- Vyměnitelná sterilizovatelná rukojeť
- Světelná intenzita: 60.000 Luxů
- Velikost operačního pole: 14 až 25 cm
- Průměr lampy : 33 cm
- Teplota barvy: 4500 Kelvinů
- Rozmezí stmívání: 50 až 100%
- Nárůst teploty v oblasti hlavy: 0,5°C
- Celková spotřeba: 28W
- Počet LED: 19
- Životnost LED: >40.000 hodin
- Pracovní vzdálenost: 70 až 140 cm
- Výšková nastavitelnost: 123 cm



Medcomplex s.r.o.

<b>04-VSL130FA</b>	Operační světlo malé-pojízdné	<b>76 332 Kč</b>
<b>04-VSL130FB</b>	Operační světlo malé-nástěnné	<b>69 416 Kč</b>
<b>04-VSL130FC</b>	Operační světlo malé-stropní do 3m výšky stropu	<b>79 356 Kč</b>

## Operační světlo LED 2SC

Operační světlo LED 2SC osazené 21 výkonnými speciálně navrženými LED zaručuje homogenitu a nejnižší zastínění ve světelném poli. Je vybavené vyměnitelnou sterilizovatelnou rukojetí, pomocí které je možno měnit velikost operačního pole v rozmezí 17 až 28 cm.

Díky dříve nedosažitelnému zobrazení barev lze snadno vidět i nejmenší odstíny barvy v tkáni. Barevné spektrum rány je zobrazeno přirozeně s výrazným kontrastem. Světlo tak poskytuje vítanou úlevu pro Vaše oči.

Díky možnosti zvýšení intenzity světla centrální části světla je umožněno optimální osvětlení oblasti rány v souladu s její texturou a účinky zastínění, což je velmi důležité zejména v případě malých a hlubokých ran.

Vyrábí se v pojízdném, nástěnném nebo stropním provedení. Držáky na strop jsou individuálně přizpůsobeny dle výšky stropu. Světlo je výškově a stranově přestavitelné a tím umožňuje nasvítit z jakéhokoliv směru libovolné místo stolu v jakékoliv poloze stolu. Životnost delší než 40.000 provozních hodin snižuje výrazně náklady na výměnu a náhradu žárovek v porovnání s konvenční halogenovou technologií. Světelná intenzita ve vzdálenosti 1 m je 100.000 Luxů, kterou lze regulovat v rozmezí 5 až 100% pomocí ovladače integrovaného do krytu lampy.

- Světelná intenzita: 100.000 Luxů
- Velikost operačního pole: 17 až 28 cm
- Průměr lampy : 49 cm
- Teplota barvy: 4500 Kelvinů
- Rozmezí stmívání: 5 až 100%
- Nárůst teploty v oblasti hlavy: 0,5°C
- Celková spotřeba: 30W
- Počet LED: 21
- Životnost LED: >40.000 hodin
- Pracovní vzdálenost: 60 až 150 cm
- Výšková nastavitelnost: 118 cm



Medcomplex s.r.o.



Nástěnné provedení

Stropní provedení

04-LED2SC1	Operační světlo LED 2SC - pojízdné	Cena na dotaz
04-LED2SC2	Operační světlo LED 2SC - nástěnné	Cena na dotaz
04-LED2SC3	Operační světlo LED 2SC - stropní do 3m výšky stropu	Cena na dotaz

## Operační světlo LED 3SC

Operační světlo LED 3SC osazené 28 výkonnými speciálně navrženými LED zaručuje homogenitu a nejnižší zastínění ve světelném poli. Je vybavené vyměnitelnou sterilizovatelnou rukojetí, pomocí které je možno měnit velikost operačního pole v rozmezí 17 až 28 cm.

Díky dříve nedosažitelnému zobrazení barev lze snadno vidět i nejmenší odstíny barvy v tkáni. Barevné spektrum rány je zobrazeno přirozeně s výrazným kontrastem. Světlo tak poskytuje vítanou úlevu pro Vaše oči.

Díky možnosti zvýšení intenzity světla centrální části světla je umožněno optimální osvětlení oblasti rány v souladu s její texturou a účinky zastínění, což je velmi důležité zejména v případě malých a hlubokých ran.

Vyrábí se v pojízdném, nástěnném nebo stropním provedení. Držáky na strop jsou individuálně přizpůsobeny dle výšky stropu. Světlo je výškově a stranově přestavitelné a tím umožňuje nasvítit z jakéhokoliv směru libovolné místo stolu v jakékoliv poloze stolu. Životnost delší než 40.000 provozních hodin snižuje výrazně náklady na výměnu a náhradu žárovek v porovnání s konvenční halogenovou technologií. Světelná intenzita ve vzdálenosti 1 m je 130.000 Luxů, kterou lze regulovat v rozmezí 5 až 100% pomocí ovladače integrovaného do krytu lampy.

- Vyměnitelná sterilizovatelná rukojeť
- Světelná intenzita: 130.000 Luxů
- Velikost operačního pole: 17 až 28 cm
- Průměr lampy: 57 cm
- Teplota barvy: 4500 Kelvinů
- Rozmezí stmívání: 5 až 100%
- Nárůst teploty v oblasti hlavy: 0,5°C
- Celková spotřeba: 45W
- Počet LED: 28
- Životnost LED: >40.000 hodin
- Pracovní vzdálenost: 60 až 150 cm
- Výšková nastavitelnost: 118 cm



Medcomplex s.r.o.

04-LED3SC1	Operační světlo LED 3SC - pojízdné	Cena na dotaz
04-LED3SC2	Operační světlo LED 3SC - nástěnné	Cena na dotaz
04-LED3SC3	Operační světlo LED 3SC - stropní do 3m výšky stropu	Cena na dotaz

## Operační světlo LED 150

Malé operační světlo LED 150 osazené 26 výkonnými speciálně navrženými LED zaručuje homogenitu a nejnižší zastínění ve světelném poli. Díky dříve nedosažitelnému zobrazení barev lze snadno vidět i nejmenší odstíny barvy v tkáni. Barevné spektrum rány je zobrazeno přirozeně s výrazným kontrastem. Světlo tak poskytuje vítanou úlevu pro Vaše oči.

Vyrábí se v pojízdném, nástěnném nebo stropním provedení. Držáky na strop jsou individuálně přizpůsobeny dle výšky stropu. Světlo je výškově a stranově přestavitelné a tím umožňuje nasvítit z jakéhokoliv směru libovolné místo stolu v jakékoliv poloze stolu. Životnost delší než 50.000 provozních hodin snižuje výrazně náklady na výměnu a náhradu žárovek v porovnání s konvenční halogenovou technologií. Světelná intenzita ve vzdálenosti 1 m je 100.000 Luxů, kterou lze regulovat v rozmezí 50 až 100% pomocí ovladače integrovaného do krytu lampy.

- Světelná intenzita: 100.000 Luxů
- Index podání barev Ra: 95
- Velikost světelného pole: 19 cm
- Průměr lampy : 38 cm
- Teplota barvy: 4000 Kelvinů
- Rozmezí stmívání: 50 až 100%
- Nárůst teploty v oblasti hlavy: 0,5°C
- Celková spotřeba: 35W
- Počet LED: 26
- Životnost LED: >50.000 hodin
- Pracovní vzdálenost: 70 až 140 cm
- Výšková nastavitelnost: 121 cm



Nástěnné provedení

Stropní provedení

<b>04-VSL150A</b>	Operační světlo malé-pojízdné	<b>92 096 Kč</b>
<b>04-VSL150B</b>	Operační světlo malé-nástěnné	<b>83 920 Kč</b>
<b>04-VSL150C</b>	Operační světlo malé-stropní do 3m výšky stropu	<b>93 804 Kč</b>



Nástěnné provedení

Stropní provedení

<b>04-VSL120A</b>	Operační světlo malé-pojízdné	<b>52 224 Kč</b>
<b>04-VSL120B</b>	Operační světlo malé-nástěnné	<b>46 316 Kč</b>
<b>04-VSL120C</b>	Operační světlo malé-stropní do 3m výšky stropu	<b>56 256 Kč</b>

## Vyšetřovací světlo LED 120

Malé vyšetřovací světlo LED-120 osazené 12-ti výkonnými speciálně navrženými LED zaručuje homogenitu a nejnižší zastínění ve světelném poli. Díky dříve nedosažitelnému zobrazení barev lze snadno vidět i nejmenší odstíny barvy v tkáni. Barevné spektrum rány je zobrazeno přirozeně s výrazným kontrastem. Světlo tak poskytuje vítanou úlevu pro Vaše oči.

Vyrábí se v pojízdném, nástěnném nebo stropním provedení. Držáky na strop jsou individuálně přizpůsobeny dle výšky stropu. Světlo je výškově a stranově přestavitelné a tím umožňuje nasvítit z jakéhokoliv směru libovolné místo stolu v jakékoliv poloze stolu. Životnost delší než 40.000 provozních hodin snižuje výrazně náklady na výměnu a náhradu žárovek v porovnání s konvenční halogenovou technologií. Světelná intenzita ve vzdálenosti 1 m je 30.000 Luxů, kterou lze regulovat v rozmezí 50 až 100% pomocí ovladače integrovaného do krytu lampy.

- Světelná intenzita: 30.000 Luxů
- Velikost světelného pole: 17 cm
- Průměr lampy : 29 cm
- Teplota barvy: 4500 Kelvinů
- Rozmezí stmívání: 50 až 100%
- Nárůst teploty v oblasti hlavy: 0,5°C
- Celková spotřeba: 18W
- Počet LED: 12
- Životnost LED: >40.000 hodin
- Pracovní vzdálenost: 70 až 140 cm
- Výšková nastavitelnost: 121 cm

## Vyšetřovací světlo LED 130

Vyšetřovací světlo LED-130 osazené 19-ti výkonnými speciálně navrženými LED zaručuje homogenitu a nejnižší zastínění ve světelném poli. Díky dříve nedosažitelnému zobrazení barev lze snadno vidět i nejmenší odstíny barvy v tkáni. Barevné spektrum rány je zobrazeno přirozeně s výrazným kontrastem. Světlo tak poskytuje vítanou úlevu pro Vaše oči.

Vyrábí se v pojízdném, nástěnném nebo stropním provedení. Držáky na strop jsou individuálně přizpůsobeny dle výšky stropu. Světlo je výškově a stranově přestavitelné a tím umožňuje nasvítit z jakéhokoliv směru libovolné místo stolu v jakékoliv poloze stolu. Životnost delší než 40.000 provozních hodin snižuje výrazně náklady na výměnu a náhradu žárovek v porovnání s konvenční halogenovou technologií. Světelná intenzita ve vzdálenosti 1 m je 50.000 Luxů, kterou lze regulovat v rozmezí 50 až 100% pomocí ovladače integrovaného do krytu lampy.

- Světelná intenzita: 50.000 Luxů
- Velikost světelného pole: 17 cm
- Průměr lampy : 33 cm
- Teplota barvy: 4500 Kelvinů
- Nárůst teploty v oblasti hlavy: 0,5°C
- Celková spotřeba: 28W
- Počet LED: 19
- Životnost LED: >40.000 hodin
- Pracovní vzdálenost: 70 až 140 cm
- Výšková nastavitelnost: 123 cm



Medcomplex s.r.o.

Medcomplex s.r.o.



Medcomplex s.r.o.

Medcomplex s.r.o.

Nástěnné provedení

Stropní provedení

<b>04-VSL130A</b>	Operační světlo malé-pojízdné	<b>66 028 Kč</b>
<b>04-VSL130B</b>	Operační světlo malé-nástěnné	<b>59 420 Kč</b>
<b>04-VSL130C</b>	Operační světlo malé-stropní do 3m výšky stropu	<b>69 360 Kč</b>



Medcomplex s.r.o.



Medcomplex s.r.o.



Medcomplex s.r.o.

## Operační vyšetřovací světlo S 300

Profesionální operační vyšetřovací světlo S300 je vyvinuto pro použití na klinikách, v nemocnicích nebo ordinacích. Díky nejnovějším technologiím poskytuje optimální zdroj světla s volitelnou barevnou teplotou a CRI (Ra) 96/ 95. Světelný zdroj je k dispozici ve verzi na pojízdném stojanu, s uchycením na dentální soupravu, zeď nebo na strop a to i ve dvousatelitové verzi 130.000+ 130.000 Lux.

### Technické parametry:

- Zdroj světla: 42 LED
- Svítivost: 40.000~ 130.000 lux (regulovatelná ve třech krocích)
- CRI (Ra) Index podání barev: 96/ 95
- 3 pracovní režimy: Dental mode (30,000 lx) Examine mode (60,000 lx) Surgical mode (130,000 lx)
- Nastavitelná barevná teplota: 3.800 / 4.300 / 4.800°K
- Průměr světelného pole: kruhové 15 - 25 cm (Možnost fokusace ve třech krocích)
- Velikost světelné hlavy: 43,5 cm
- Životnost LED: 60.000 h (ca 20 let při 8hod/ den)
- Napájení: 100~ 250V AC, 50/60 Hz

<b>05-S300A</b>	Operační vyšetřovací světlo S 300 - pojízdné	<b>102 300 Kč</b>
<b>05-S300B</b>	Operační vyšetřovací světlo S 300 - nástěnné	<b>102 300 Kč</b>
<b>05-S300C</b>	Operační vyšetřovací světlo S 300 - stropní	<b>102 300 Kč</b>

## Operační vyšetřovací světlo S 200

Profesionální operační vyšetřovací světlo S200 je vyvinuto pro použití na klinikách, v nemocnicích nebo ordinacích. Díky nejnovějším technologiím poskytuje optimální zdroj světla s volitelnou barevnou teplotou a CRI (Ra) 90. Světelný zdroj je k dispozici ve verzi na pojízdném stojanu, s uchycením na dentální soupravu, zeď nebo na strop a to i ve dvousatelitové verzi 100.000+ 100.000 Lux.

### Technické parametry:

- Zdroj světla: 18 LED
- Svítivost: nově 100.000 lux (regulovatelná v 5ti krocích)
- CRI (Ra) Index podání barev: 90
- Nastavitelná barevná teplota: 3.800 / 4.300 / 4.800°K
- Průměr světelného pole: kruhové 18 - 30 cm (Možnost fokusace)
- Velikost světelné hlavy: 35 x 34 cm

- Životnost LED: 50.000 h (17 let při 8hod/ den)
- Napájení: 100~ 250V AC, 50Hz



Medcomplex s.r.o.



Medcomplex s.r.o.

Stojanové provedení



Medcomplex s.r.o.

Nástěnné provedení



Medcomplex s.r.o.

<b>05-E100D</b>	Vyšetřovací lampa E 100- na desku stolu	<b>28 400 Kč</b>
<b>05-E100S</b>	Vyšetřovací lampa E 101-stojanová	<b>31 900 Kč</b>



Medcomplex s.r.o.

Stropní provedení



Medcomplex s.r.o.

Stropní provedení

<b>05-S200A</b>	Operační vyšetřovací světlo S 200 - pojízdné	<b>79 200 Kč</b>
<b>05-S200B</b>	Operační vyšetřovací světlo S 200 - nástěnné	<b>79 200 Kč</b>
<b>05-S200C</b>	Operační vyšetřovací světlo S 200 - stropní	<b>79 200 Kč</b>

## Stojanová vyšetřovací lampa Primalex

### Technické parametry:

- Zdroj světla 9 x LED
- Svítivost v 50 cm až 100.000 Lux nastavitelná v šesti krocích
- Průměr světelného pole 17cm
- Nastavitelná barevná teplota 4.000/ 4.500 °K
- CRI (RA) Index podání barev 95
- Životnost LED 50 000 h
- Napájení 110- 240 V, 50- 60 Hz
- Certifikace IEC 60601-1 a 60601-1-2 a zvláštní normy IEC 60601-2-41 93/42 EEC a 2007/43 EC a je označen CE jako zdravotnický prostředek třídy
- Sterilizovatelné madlo

## Brašny a kufry

### Brašna lékařská Super Texas

Lékařská brašna Super Texas je tradiční prostorná brašna pro lékaře.

- omyvatelná
  - vnitřně dělená, obsahuje ampulárium
  - opatřena 4 vnějšími kovovými "nožkami", které brašnu chrání proti oděru při jejím pokládání na zem
- Rozměry: 42 cm x 22 cm, v – 22 cm  
Materiál: pravá kůže



Medcomplex s.r.o.

16-P02615	Brašna lékařská Super Texas, černá	7 124 Kč
-----------	------------------------------------	----------

### Brašna záchranářská LIFE 2

Lékařská záchranářská brašna první pomoci Life 2 je rozdělena do 2 sekcí - spodní a vrchní.

Záchranářská brašna je ve spodní sekci účelně přizpůsobena k přenosu a uložení větších pomůcek. Je prostorná s pevným, hladkým, vyjímatelným plastovým dnem o rozměrech 47 x 26 x 11 cm.


Záchranářská brašna ve vrchní sekci obsahuje 5 vyjímatelných barevně odlišených úložných kapes s průhledným okénkem. Každá kapsa (25 x 15 x 6 cm) má ucho pro snadnější manipulaci a je opatřena zipem. Kapsy je možné fixovat jednu vedle druhé suchým zipem ke dnu brašny. Uložené pomůcky jsou tak stále na svém přehledném místě.

Kromě možnosti uložení pomůcek do kapes je možné si je uvnitř brašny navíc přehledně uchytit i k vnitřním stěnám za gumové pásy. Pásy jsou po celé délce prošité zhruba po 1 až 2 cm.

Záchranářská brašna má další úložný prostor i v horním krytu. Jsou jím 2 suchým zipem uzavíratelné průhledné a poměrně prostorné kapsičky (např. pro náplastě, obvazy).



Medcomplex s.r.o.

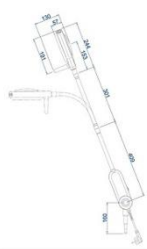

Medcomplex s.r.o.

Medcomplex s.r.o.

05-VLP	Stojanová vyšetřovací lampa Primalex	24 840 Kč
--------	--------------------------------------	-----------

### Vyšetřovací světlo LED 3 HEINE EL

Osvětlení bez stínů. Kompaktní osvětlovací hlava (Ø cca 60 mm) umožňuje pohodlné a přesné polohování, zejména v obtížných aplikačních situacích. Optimální umístění eliminuje nežádoucí stíny v osvětleném poli.

- Bezúdržbový a snadno se čistí. Uzavřená hlavice Cool-Touch umožňuje bezpečnou a snadnou dezinfekci.
- Optimální umístění. Lehká hlava a stabilní husí krk umožňují snadné a intuitivní nastavení a udržují světlo přesně v požadované poloze.
- Různé možnosti montáže. Montáž na stěnu, svorka pro montáž na stůl nebo na stojan na kolečkách.



Medcomplex s.r.o.

Medcomplex s.r.o.

22-J-008.27.014	EL3 LED vyšetřovací světlo, stojan na kolečkách, kovová základna	22 059 Kč
22-J-008.27.011	EL3 LED vyšetřovací světlo, montáž na stěnu	16 335 Kč
22-J-008.27.013	EL3 LED vyšetřovací světlo, svorka pro montáž na stůl	18 684 Kč

- vyrobená z pevného a voděodolného materiálu, nylonu
- lze snadno čistit
- barva brašny: červená se žlutými reflexními proužky
- určena k přenášení v ruce či na rameni

Rozměry: 48 x 25 cm, v - 30 cm



Medcomplex s.r.o.

**16-P03747** Brašna záchranářská LIFE 2 **2 730 Kč**

## Brašna záchranářská SMART

Brašna první pomoci pro záchranáře se 6 nastavitelnými částmi a 4 vnějšími kapsami.

Charakteristika:

Lékařská záchranářská brašna první pomoci Smart, umožňuje rozdělení vnitřního prostoru až na 6 oddělených částí, a to díky vyztuženým přepážkám, které se upevňují suchým zipem. Jejich velikost lze měnit. Vně brašny jsou 4 kapsy.

Vnitřní část jedné vnější kapsy je vybavena dvěma gumovými pásy pro fixaci a uložení nástrojů či jiných pomůcek. Zároveň jsou v této kapse ještě další 4 účelně všíité ukládací prostory (ne uzavírací).

Pod vrchním krytem záchranářské brašny je další pěkná kapsa na suchý zip s okénkem. Dá se snadno vyjmout a naopak pevně suchým zipem fixovat.

- vyrobená z pevného a voděodolného materiálu, nylonu
- lze snadno čistit
- barva brašny: červená se žlutými reflexními proužky
- určena k přenášení v ruce, na rameni i zádech jako batoh (navíc vybavena párem popruhů)

Rozměry: 55 x 35 cm, v - 32 cm



Medcomplex s.r.o.

**16-P03744** Brašna záchranářská SMART **2 996 Kč**

**Medcomplex s.r.o.**

Masty 1

518 01 Dobruška

Czech Republic

email: info@medcomplex.cz

mobil: +420 776 270 683

**Ceny jsou uvedeny bez DPH / ks bez nákladů na dopravu a jsou platné ke dni vydání nabídky (1.3.2024).**